



DISTRIVEL 440®

**Zwiększ swoją**

*Wydajność*

*Jakość*

*Identyfikowalność*

**WYDAJNOŚĆ**



**440 płytek wylanych  
w 30 minut**

DISTRIVEL 440®

**Uruchom i odejdź**

Do 440 płytek wylanych  
w 30 minut



**Identyfikowalność**

Wydrukuj do 25 znaków (2 linie) na  
płytkę Petriego (z opcjonalną drukarką)



Wbudowane ogniwo chłodzące Peltiera  
skraca czas kondensacji i krzepnięcia

0°



Pewność wylewania  
równych płytek  
(zintegrowana poziomicą)

**ZAPOBIEGANIE KONTAMINACJI  
Z POWIETRZA**

Zapobieganie kontaminacji (lampa  
UV) podczas zalewania + osłona z  
pleksiglasu

Możliwość dodawania  
krwi

7" ekran dotykowy LCD  
Intuicyjny wyświetlacz

Kolorowe alarmy wizualne


Twoje pożywki hodowlane są dokładnie  
nalewane za pomocą **pompy perystaltycznej Masterflex®**





**SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA**

**DISTRIWEL 440®**

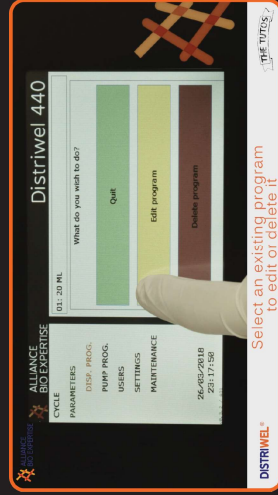

**Ustaw program z łatwością za  
pomocą naszego przewodnika**



Distriwel - How to set a program




**YouTube**

Nie przegap żadnych filmów: zapisz się do kanału A.B.E. na Youtube:

ALLIANCE BIO EXPERTISE



Strona 8

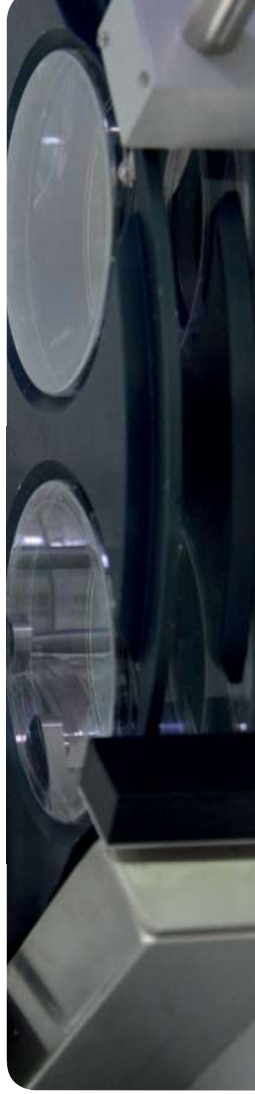

## FUNKCJE

Płytki 90mm / godz.	Do 750
Pojemność karuzeli	440 płytek
Szybkie chłodzenie płytek	Wbudowane ogniwo Peltiera
Zapobieganie kontaminacji	Wbudowana lampa UV
Funkcja nalewania płytek	✓
Dokładność nalewania	±1%
Zakres nalewania	0,1 ml – 99,9 ml (zalewanie płytek) 0,1 ml – 999,9 ml (tryb pompy)
Płytki w kolumnach	✓
Pompa perystaltyczna	Zintegrowana pompa Masterflex®
Zapisane programy	40
Panel kontrolny	Ekran dotykowy LCD
Kraj produkcji	100% Francja
Identyfikowalność (opcjonalnie)	Drukarka (LINX 8900): nadruk na płytkach Petriego
Przełącznik nożny (do ręcznego dozowania)	✓ (opcjonalnie)

## WYMIARY I ZASILANIE

Szerokość x wysokość x głębokość	808 x 940 x 689mm
Zasilanie	100-240V - 50-60 Hz - 1,7A
Moc	150 W

**ZAPAKUJ SWOJE  
GOTOWE PŁYTKI!**



ZAMÓW RAZEM Z DISTRIWEL 440 / Ref. MINIMA