



ARGENTA



Molecision™ MP-32


Molecision™ MP-96

Zestaw do ekstrakcji kwasów
nukleinowych Molecision™



Small-package to reduce waste

W pełni automatyczny system oczyszczania kwasów nukleinowych

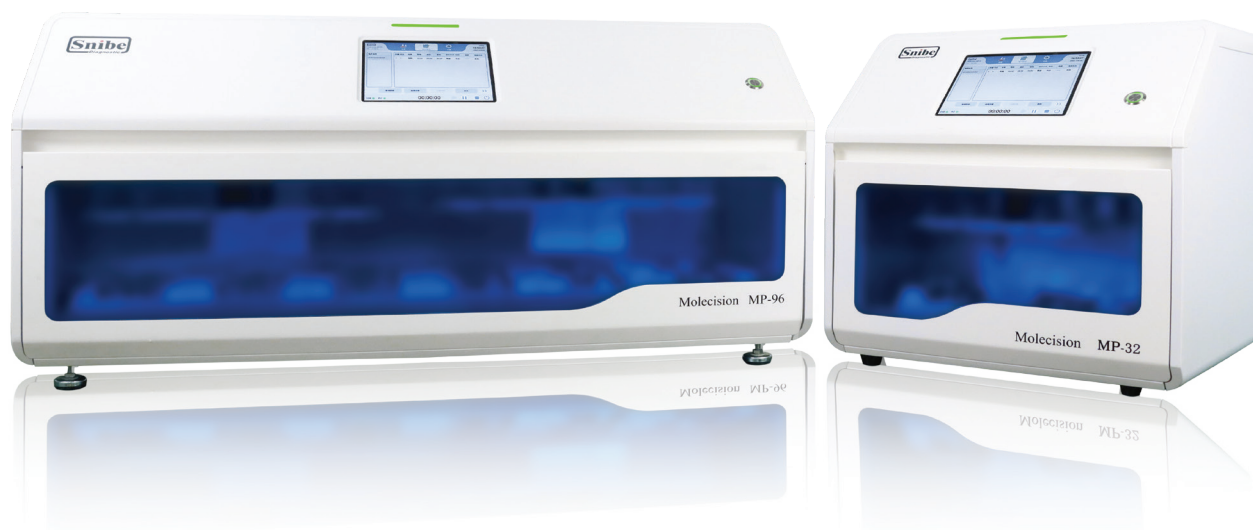

* 7 minut to efektywny czas ekstrakcji dla zestawu typu FAST. Dokładny czas trwania zależy od różnych zestawów i matryc.



SOLIDNA PODSTAWA DO TESTOWANIA KWASÓW NUKLEINOWYCH:

- uniwersalne odczynniki kompatybilne z szerokim zakresem matryc
- krótkie czasy ekstrakcji
- możliwość dowolnego programowania instrumentów pozwala na zastosowanie aplikacyjne w różnych obszarach diagnostyczno-naukowych



Wydajny

Wstępnie napełnione odczynniki bez konieczności obsługi manualnej



Przyjazny dla użytkownika

Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości oraz przyjazny interfejs użytkownika



Elastyczny

Wiele trybów dla zapewnienia kompatybilności z różnymi odczynnikami



Bezpieczny

Wysokowydajny bawełniany filtr HEPA i lampa UV

Informacje na temat zamówień	Nazwa	Specyfikacja	Nr katalogowy
Aparat do ekstrakcji na 32 próbki	Molecision™ MP-32		010109010101
Aparat do ekstrakcji na 96 próbek	Molecision™ MP-96		010109030101
Odczynniki	Zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych Molecision™	32 izolacje	132131001HC
	Szybki zestaw do ekstrakcji kwasów nukleinowych Molecision™	32 izolacje	132131004HC
Materiały eksploatacyjne	8-krotna końcówka		132131002H
	96-dołkowa płytki		132131003H

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Molecision™ MP-32	Molecision™ MP-96
Wydajność	1-32	1-96
Ilość prętów magnetycznych	32	96
Zasada	Metoda ekstrakcji wykorzystująca kulki magnetyczne	
Zakres temperatur	Temperatura otoczenia do 115°C	
Metoda mieszania	Szybka, średnia i wolna prędkość oraz mieszanie dolne i środkowe dla różnych protokołów	
Kontrola zanieczyszczeń	Automatyczna lampa UV / filtr HEPA	
Interfejs zewnętrzny	Obsługa USB, interfejs danych RS-232, interfejs sieciowy RJ45	
Zasilanie	AC 100-240, 50/60Hz 350VA	AC 100-240, 50/60Hz 900VA
Wymiary / waga	460 mm* 392 mm* 470 mm, 33 kg	992 mm* 392 mm* 478 mm, 60 kg



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl