



ARGENTA



GOLD
STANDARD
DIAGNOSTICS

Zestawy do detekcji alergenów

SENSIStrip Allergen Lateral Flow Tests

SENSISpec Allergen ELISA Kits

DNAllergen Real-Time PCR Kits



Szybkie wykrywanie alergenów

przyspieszenie wprowadzenia partii produktów na rynek



Kompletne zestawy

wszystkie niezbędne i gotowe do użycia materiały



Czułe metody o niskich limitach detekcji

wysoka stabilność, dokładność i powtarzalność



Detekcja alergenu na podstawie DNA


uniknięcie błędnych wyników testów immunologicznych



SENSIStrip Allergen Lateral Flow Tests

- szybkie i łatwe oznaczanie alergenów na różnych etapach produkcji – wyniki analizy w 15 minut
- uzyskanie półilościowego wyniku w oparciu o kartę oceny
- 23 zestawy SENSIStrip Allergen
- wykrywane alergeny:

migdały	orzechy pekan	ryby	gorczyca
Beta-laktoglobulina	orzechy włoskie	gluten	owalbumina
orzechy brazylijskie	kazeina	łubin	pistacje
orzechy ziemne	kokos	lizozym	sezam
orzechy laskowe	skorupiaki	białko mleka	białko soi
orzechy macadamia	białko jaja		

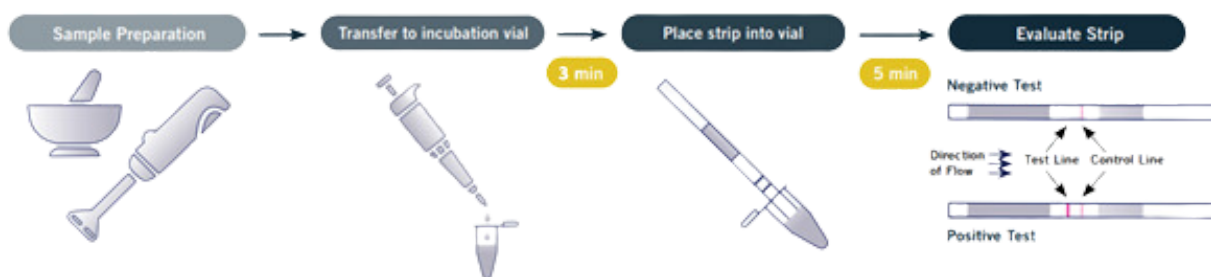

Schemat wykonania testu SENSIStrip Allergen Lateral Flow Tests

SENSISpec Allergen ELISA kits

- jednoczesne przeprowadzanie 48 lub 96 oznaczeń – otrzymanie ilościowych wyników w ciągu 1 h
- automatyzacja testów ELISA – mniejsze obciążenie pracą personelu, standaryzacja wydajności
- 25 zestawów SENSISpec Allergen
- wykrywane alergeny:

migdały	orzechy ziemny	białko jaja	gorczyca
Beta-laktoglobulina	orzechy pekan	ryby	owalbumina
nerkowce	orzechy włoskie	łubin	pistacje
orzechy brazylijskie	kazeina	lizozym	sezam
orzechy laskowe	kokos	białko mleka	soja
orzechy macadamia	skorupiaki	mięczaki	gluten

DNAllergen Real-Time PCR Kits

- detekcja alergenu na podstawie DNA – uniknięcie błędów wynikających z reaktywności krzyżowej
- zestaw zawiera niezbędne odczynniki do przeprowadzenia 50 reakcji Real-Time PCR
- kompatybilne z termocyklerami m.in. Applied BioSystems™ 7500 Fast, Quant Studio 5, Bio-Rad CFX 96, Light Cycler 480 (Roche)
- wykrywane alergeny:

migdały	orzechy laskowe	musztarda (gorczyca)	sezam
seler	orzechy ziemne	owies	soja
ryby	mięczaki		

